

# Manual de Instruções

**ATENÇÃO:** Para sua segurança, não utilize este produto sem antes ler as instruções contidas neste manual. Caso haja alguma dificuldade na utilização deste produto, consulte a J.G. Moriya Ltda. A não observância destas regras e as de segurança poderá causar sérios danos materiais e humanos.



## Máscara Facial

**Fabricante:**

APEX MEDICAL CORP.

#9, Min Sheng St. Tu-Cheng, Taipei County, 236, Taiwan, R.O.C. TEL:+886-2-22683100 / FAX:+886-2-22686525 /

E-mail:[marketing@apexmedical.com.tw](mailto:marketing@apexmedical.com.tw)

**Importador/Distribuidor no Brasil:**

J.G. Moriya Representação Importadora Exportadora e Comercial Ltda.

Rua Colorado, 291 – Vila Carioca – Ipiranga – São Paulo – SP

CEP 04225-050 – Telefones: (11) 6914.9716/273.4313 – Fax: (11) 6914.1943

C.N.P.J. 67.882.621/0001-17 Inscrição Estadual 113.497.753.111

Declarado isento de registro no Minsitério da Saúde

Cadastro no Ministério da Saúde: 10349590069

Técnico Responsável: Eng. Juan Goro Moriya Moriya

CREA 0600289359/D

### **Nota de Propriedade!**

As informações contidas neste documento são de propriedade da J.G. Moriya e não podem ser duplicadas em parte ou em sua totalidade sem autorização por escrito da J.G. Moriya. Até a data desta publicação, todos os esforços foram feitos para que as informações contidas neste manual sejam as mais precisas possíveis. Entretanto, nenhuma garantia é dada de que este manual esteja livre de erros. A J.G. Moriya reserva-se o direito de fazer as alterações que julgar necessárias no manual ou no produto sem qualquer aviso prévio.

### **Atenção!!!**

Para total aproveitamento e conservação de sua Máscara Facial, leia cuidadosamente as informações contidas neste manual. E qualquer dúvida contate a Assistência Técnica da J.G. Moriya.

Para sua segurança e de outros não utilize este produto sem antes ler e entender as instruções contidas neste manual. Caso não entenda totalmente estas instruções, consulte a J.G. Moriya Ltda. para maiores esclarecimentos. A não observância das regras de segurança poderá causar sérios danos materiais e humanos.

### **Apresentação**

As máscaras J.G. Moriya foram concebidas e fabricadas sob conceitos internacionais de qualidade e tecnologia. A máscara Nasal foi concebida para ser utilizada por pacientes adultos aos quais o seu médico ou terapeuta respiratório receitou terapia CPAP (Pressão Positiva Contínua na via Aérea) ou de duplo nível. Utiliza-se junto com o sistema de pressão positiva contínua (CPAP) em via aérea ou de duplo nível em domicílio, hospital e meios institucionais.

### **Descrição para Pedido**

668041-0000 – Máscara facial Grande

668042-0000 - Máscara facial Média

668043-0000 - Máscara facial Pequena

### **Características do Produto**

- ✓ O projeto sob o queixo proporciona a máxima estabilidade e vedação, mesmo com movimentos da mandíbula.
- ✓ A camada leve e macia interna dá aos usuários a sensação facial refrescante.
- ✓ O design do contorno anatômico com nervuras de apoio reforça a vedação e conforto.
- ✓ A interface única da almofada macia e conector giratório favorecem os movimentos ao dormir.
- ✓ Conector Giratório 360º fornece remoção fácil da tubulação sem ter que retirar a máscara.
- ✓ A porta de exalação fornece aos pacientes ar fresco e sem perda de pressão, enquanto o gerador de fluxo não está trabalhando.
- ✓ As saídas de ar minimizam os ruídos que perturbam o sono e proporcionam uma saída eficiente de CO<sub>2</sub>.
- ✓ As portas são ideais para monitoração de pressão e suprimento de oxigênio.
- ✓ Os cliques da headgear na máscara tornam a fixação e remoção simples.
- ✓ Disponível nos tamanhos Pequeno, Médio e Grande.

### **Condições ambientais:**

Funcionamento:

Temperatura: +5°C a +35°C

Umidade: +15% a +95% não condensado


Armazenamento:

Temperatura: -15°C a 50°C

Umidade: +10% a +90% não condensado





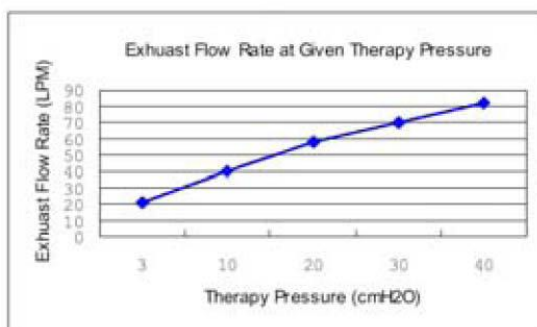



Vida útil: 5 anos



### Instruções de Uso:

<p><b>Figura 1</b> Colocar o suporte de correias com velcro para baixo sobre uma superfície plana e soltar 2 tiras de velcro em A1 e A2.</p>	<p><b>Figura 2</b> Identificar as posições de fixação de suporte de correias na máscara.</p>	<p><b>Figura 3</b> Passar a correia superior A1 do suporte através da ranhura B1 na máscara, comprovando que o velcro fique para fora.</p>
<p><b>Figura 4</b> Sujeitar a fita velcro.</p>	<p><b>Figura 5</b> Passar a correia superior A2 do suporte através da ranhura B2 da máscara, comprovando que o velcro fique para fora.</p>	<p><b>Figura 6</b> Sujeitar a fita velcro.</p>

		
<p><b>Figura 7</b> Colocar o suporte de correias na cabeça e ajustar ambas correias superiores com uma tensão confortável.</p>	<p><b>Figura 8</b> Apertar a fivela de plástico A3 em B3 na estrutura da máscara.</p>	<p><b>Figura 9</b> Apertar a fivela de plástico A4 em B4 na estrutura da máscara.</p>
		
<p><b>Figura 10</b> Ajustar de novo ambas correias superiores A1 e A2 com uma tensão confortável 1.</p>	<p><b>Figura 11</b> Ajustar ambas correias inferiores A3 e A4 com uma tensão confortável.</p>	<p><b>Figura 12</b> Colocação terminada.</p>

- ✓ Para retirar a máscara e o suporte, desapertar simplesmente ambas fivelas da máscara e retirar a correia superior da cabeça.
- ✓ Para voltar a utilizar a máscara e o suporte, colocar simplesmente o suporte de correias sobre a cabeça e apertar ambas fivelas.

**Contra-indicações:**

Função do esfíncter cardíaco alterada

Refluxo excessivo

Reflexo da tosse alterado

Hérnia de hiato

Não deve ser utilizada se o paciente está insensível, deprimido, incapacitado de retirar a máscara ou está pouco disposto a colaborar.



**Advertências:**

- ✓ Contate um profissional de saúde caso tenha sensações incômodas no peito, respiração, falta de cuidado, distensão do estômago, arrotos ou fortes dores de cabeça.
- ✓ Evitar comer ou beber três horas antes de utilizar a máscara para reduzir o risco de vômitos durante o sono.
- ✓ Não utilizar esta máscara se estiver tomando medicamentos que possam produzir vômitos.
- ✓ Não utilizar esta máscara a menos que o sistema CPAP ou de duplo nível esteja conectado e funcionando corretamente. Quando o sistema não estiver sendo operado, o ar exalado pode

voltar a ser inspirado. Voltar a inspirar o ar exalado por mais de alguns minutos pode, em algumas circunstâncias, provocar asfixia.

- ✓ Não bloquear o conduto de exalação.
- ✓ Antes de usar, limpar a máscara seguindo as instruções que se incluem a seguir.

### **Instruções de limpeza**

- ✓ Separar o suporte de correias da máscara.
- ✓ Lavar as mãos com sabão neutro e água quente, enxaguar a máscara e os seus componentes com água abundante.
- ✓ Secar ao ar livre antes de utilizar novamente.



- ✓ Não utilizar água sanitária, cloro, álcool ou soluções aromáticas uma vez que podem provocar rigidez ou encurtar a vida do produto.

### **Garantia**

A J.G. Moriya Representação Importadora Exportadora e Comercial Ltda., assegura ao proprietário-consumidor do produto aqui identificado, garantia contra defeitos de fabricação, desde que constatado por técnico autorizado pela J.G. Moriya Representação Importadora Exportadora e Comercial Ltda., pelo prazo de 365 dias, a partir da data de aquisição pelo primeiro comprador-consumidor, do produto constante da Nota Fiscal de Compra.

A J.G. Moriya Representação Importadora Exportadora e Comercial Ltda., executará a mão-de-obra e a substituição de peça(s) com defeito (s) de fabricação, em uso normal do produto. Serão gratuitas dentro do período de garantia.

A J.G. Moriya Representação Importadora Exportadora e Comercial Ltda., declara a garantia nula e sem efeito, se este produto sofrer qualquer dano provocado por acidentes, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, queda, mau uso, etc.), uso em desacordo com o Manual de Instruções, por ter sido ligado à rede elétrica imprópria ou sujeita a flutuações excessivas ou ainda no caso de apresentar sinais de violação, consertado por técnicos não autorizados pela J.G. Moriya Representação Importadora Exportadora e Comercial Ltda.

A considerar, o consumidor que não apresentar a representação numérica do código de barras e a Nota Fiscal de Compra do produto, será também considerada nula sua garantia, bem como se a Nota Fiscal conter rasuras ou modificações em seu teor.

A J.G. Moriya Representação Importadora Exportadora e Comercial Ltda. obriga-se a prestar os serviços acima referidos. O proprietário-consumidor será o único responsável pelas despesas e riscos de transporte do produto (ida e volta).

**ESTE PRODUTO DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE AO USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR**

### **Assistência Técnica**



J.G. Moriya Representação Importadora Exportadora e Comercial Ltda.  
Rua Colorado, 291 – Vila Carioca – Ipiranga – São Paulo – SP  
CEP 04225-050 – Telefones: (11) 6914.9716/273.4313 – Fax: (11) 6914.1943  
C.N.P.J. 67.882.621/0001-17 Inscrição Estadual 113.497.753.111  
Registro no Ministério da Saúde: 10349590069  
Técnico Responsável: Eng. Juan Goro Moriya Moriya  
CREA 0600289359/D

Para poder usufruir com segurança da garantia do sua Máscara Facial é necessário que a ficha abaixo seja completamente preenchida e enviada a J.G. Moriya Ltda., por meio de fax (11.2914.1943), e-mail ([jgmoriya@jgmoriya.com.br](mailto:jgmoriya@jgmoriya.com.br)) ou correio.

#### FICHA DE REGISTRO DO PRODUTO

Nome Completo/Razão Social: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Endereço Completo: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

CEP/Cidade/Estado: \_\_\_\_\_

Telefones para Contato: \_\_\_\_\_

Fax: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

R.G./Inscrição Estadual: \_\_\_\_\_

C.P.F./C.N.P.J.: \_\_\_\_\_

Qual produto foi adquirido: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

De qual empresa adquiriu o produto: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Qual número de série ou representação numérica do código de barras: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Caso tenha adquirido diretamente da J.G. Moriya informar a representação numérica do código de barras e/ou o número de série e número da Nota Fiscal: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_